



CI:Z.LABO

Esthe Pro C II

取扱説明書

多機能美顔器エステプロCII


保管用

保証書付

本製品の特徴	1
安全上のご注意	2
セット内容と各部の名称	4
充電方法	5
ご使用上の注意	6
ご使用前の準備	7
ご使用方法	8
おすすめ手順(フェイス)	12
おすすめ手順(ボディ)	13
製品のメンテナンス方法	14
保管について	15
故障かなと思ったら	16
海外でのご使用について	17
無料修理規定・アフターサービスについて	18
保証書	



エステティシャン直伝!
簡単トリートメントマニュアル
動画はこちら!

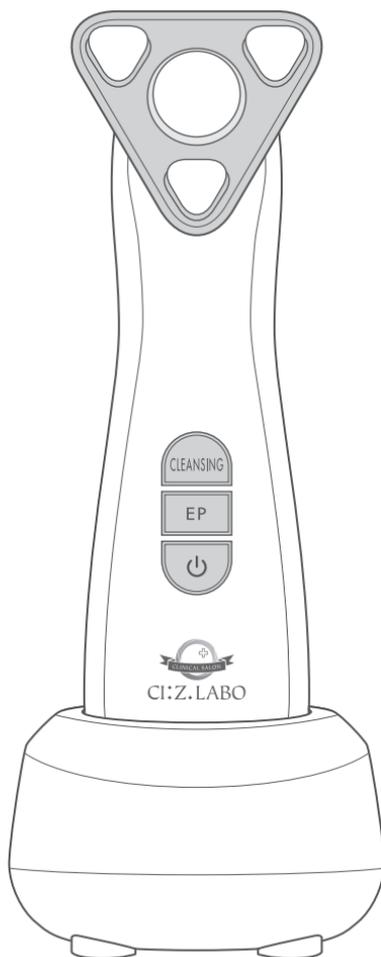

お買い上げいただき、ありがとうございます。

- ご使用前に本書を必ずお読みの上、正しく安全にお使いください。
- 本書および保証書は大切に保管してください。
- 本商品は美容を目的としたものであり、医療機器ではありません。治療を目的とした使用もしくは販売は法律上禁じられております。
- 本商品は健康なお肌への使用を前提としたものですので、既往症による治療を受けている方、部位への使用に関するトラブルは一切の責任を負いかねます。
- 本商品は正規販売店で購入時のみの保証となります。フリマアプリ、オークションサイトなどでご購入の場合の保証は致しかねますのでご注意ください。

本製品の特徴

本製品はイオンクレンジング・RF・EMS・EP・LEDを搭載した家庭用美容器です。ご自身でトリートメントを行うことができます。


イオンクレンジングモード

お肌にたまった汚れを除去します。


EPモード

お肌をつまむような感覚と、温感、推奨化粧品の導入(※角質層まで)を行います。

三角ヘッドの特徴

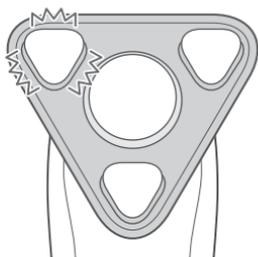

お顔の隅々までフィットしやすい設計
3つのEPヘッドからランダムに流れる電流が、ハンドケアのような感覚へ導きます。

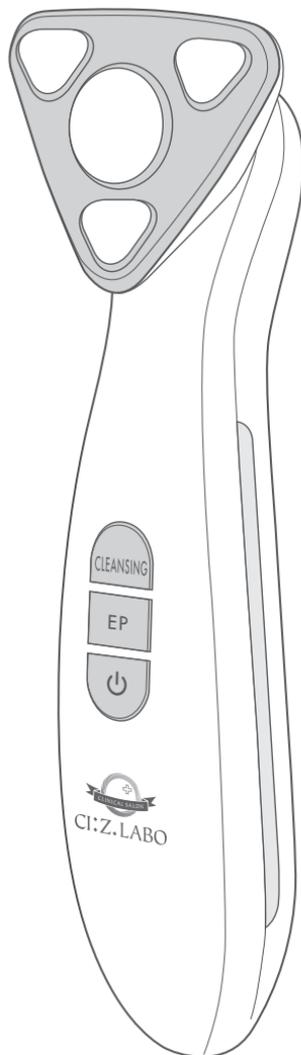

安全上のご注意

- ・ご使用前に本書を必ずお読みいただき、正しくお使いください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な事項ですので必ず守ってください。
- ・誤った取扱いをしたときに想定される内容を「警告」「注意」に区分けしています。

絵表示について

 記号は「警告」「注意」を示します。図の中や近くに具体的な注意内容を示します。

 **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容

 **注意** 人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例

 記号は、してはいけない「禁止」を示します。

 記号は、必ずしていただく「強制」を示します。

 警告	
	<ul style="list-style-type: none">●電源アダプタが痛んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 →感電・ショート・発火の原因になります。●電源アダプタを傷つけたり、電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、はさみこんだり、加工したりしないでください。 →電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。●本体・充電台・電源アダプタを水につけたり、水をかけたりしないでください。 →故障やショート・感電の原因になります。●電源コネクタ受部にピンやごみ、ほこりを付着させないでください。 →ショート・感電・発火・故障の原因になります。●コンセントや配線器具の定格を超える使い方をしないでください。 →発火による火災の原因になります。●製品に異物を挿入しないでください。 →故障やショート・発火・感電の原因になります。●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 →故障やショート・発火・感電の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">●メンテナンスの際は必ず電源アダプタの電源プラグをコンセントから抜いてください。 →感電やケガの原因になります。●電源プラグは、根元まで確実に差し込んでください。●乳幼児の手の届くところにこの製品を置かないでください。●お子様がこの製品で遊ばないように管理してください。


安全上のご注意

⚠ 注意


	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを抜くときは、電源コード部を持たずに必ず先端の電源プラグ部を持って引き抜いてください。 →感電・ショート・発火の原因になります。 ●使用時以外は、電源アダプタをコンセントから抜いてください。 →ケガ、やけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。 ●使用するときは、専用の電源アダプタを使用してください。 ●電源アダプタが破損・故障した場合は、事故を避けるために必ず販売店に連絡してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●この製品が破損または故障した場合は、使用しないでください。 →ケガの原因になります。 ●製品本体に強いショックを与えたり、落としたり激しく振ったりしないでください。 ●15歳未満の方は使用しないでください。15～18歳の方は、保護者同意の上、監視のもとでお使いください。
	<p>使用上のご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●この製品は防水ではありません。浴室、水中では使用しないでください。 ●この製品は電磁波部品を内蔵しています。ICカード・プリペイドカードやペースメーカー等の医用電子機器に近づけないでください。 ●海外でご使用の際は、P.17「海外でご使用について」を参照してください。 <p>お手入れの際のご注意</p> <ul style="list-style-type: none"> ●この製品を液体の中に浸したり、水道水ですすいだりしないでください。 ●この製品を食洗機で洗わないでください。 ●この製品は、使用の都度、清掃してください。詳しくはP.14「製品のメンテナンス方法」の項をお読みください。 ●極端に高温または低温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。 ●夏場、車の中には放置しないでください。 ●ほこりがつきにくい場所で保管してください。 ●使用しないときは、電源を入れたまま放置しないでください。 <p>下記に該当する箇所には、この製品を使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●目、耳、唇、鼻の穴、喉仏、乳首、乳輪、へそ内部、性器、粘膜、腔部、肛門、男性はこれらに加えて男性器 ●シリコン注入部位、ペースメーカー、皮下埋め込み式カテーテル(ポート)、ピアスの穴、ボディピアスの穴、美容整形の施術箇所 ●いぼ、ほくろ、大静脈、しみ、濃い色素班の見られる箇所、傷跡、皮膚に異常の見られる場所 ●刺青(タトゥー)、ボディペイント、アートメイクのある場所 ●長時間効果が持続する制汗剤・香水を使用している箇所 <p>下記に該当する方は、この製品を使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●妊娠中、授乳中、または過去3週間以内に手術した方 ●皮膚がん、またはお手入れしようとする範囲に何らかのがん疾患もしくはがんの兆候がある方 ●心臓に疾患がある方 ●お手入れしようとする範囲に下肢静脈瘤、血管拡張症などの血管病の既往歴がある方 ●お手入れしようとする範囲に皮膚感染、アトピー、やけど、毛根の炎症、裂傷、ヘルペスなど皮膚疾患のある方 ●出血障害のある方 ●皮膚のケロイド症状、創傷治癒欠損など膠原病の既往歴がある方 ●糖尿病、紅斑性狼瘡、ポルフィリン症、うっ血性心臓病などの疾患がある方 ●HIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染者、またはAIDS(後天性免疫不全症候群)既往の方 ●ヒアルロン酸、βヒアルロン酸、イソトレチノイン、アゼライン酸で皮膚を治療中または6か月以内に治療を受けた方 ●鎮痛剤、抗凝血剤、免疫抑制剤を使用している方、アスピリンを多用する方 <p>※ご自分がこの製品の使用に適するかどうか不明な場合、皮膚疾患に限らず、現在医師の治療を受けている方、また、使用中に異常を感じた場合は、主治医にご相談下さい。</p>

セット内容と各部の名称

【本体】

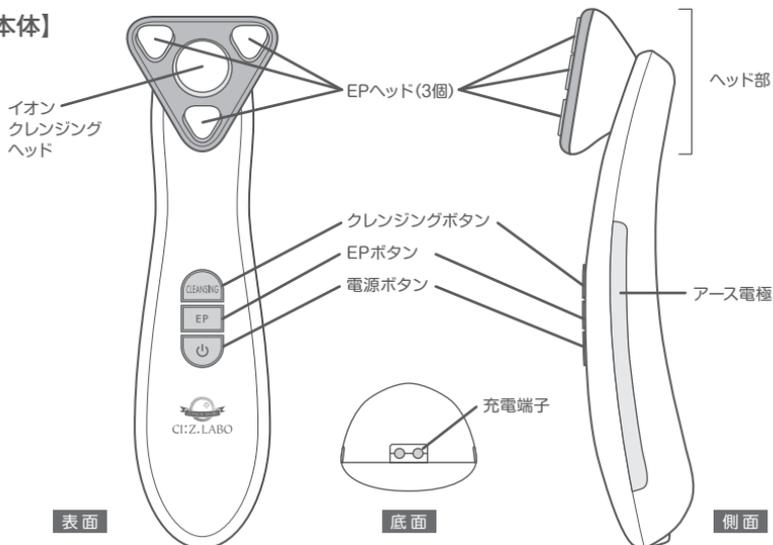

【充電台】

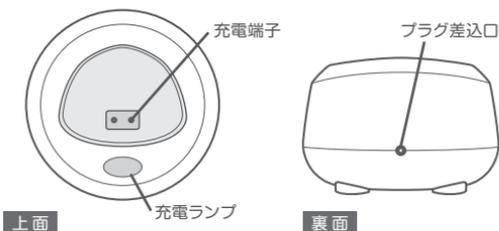

製品仕様

■本体

サイズ	W45×H179×D42mm
入力電圧	DC 5V
消費電力	最大6W
重量	120g

■電源アダプタ

出力コード	1.8m 脱落防止型DCプラグ付
入力電圧	AC100V~240V 50/60Hz
出力	DC5V 1.0A

■充電台

サイズ	W80×H61×D80mm
-----	---------------

【電源アダプタ】



【ポーチ】



【取扱説明書】




【簡単 トリートメント マニュアル】



充電方法

① 電源アダプタを本体とコンセントに差し込む

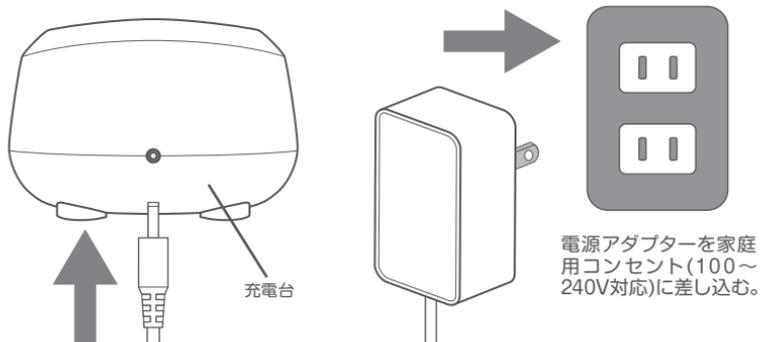

② 充電台に本体をセットする



ご使用上の注意

ご使用する際は以下のことを守ってください。



お手入れする際は以下の順番を守ってください。

イオンクレンジングモードの場合	EP(エレクトロポレーション)モードの場合	クレンジングケア・EPモード
化粧水塗布(水分の多いもの)→		化粧水塗布(水分の多いもの)→
イオンクレンジングモード→	ジェル・美容液塗布→	イオンクレンジングモード→洗い流し→
洗い流し→保湿	EPモード→保湿	ジェル・美容液塗布→EPモード→保湿

注意

- お手入れ中はヘッドを1箇所を留めずにゆっくり動かし続けてください。
- ヘッドは強く押しあてず、すべらせるようにゆっくり動かしてください。
- お肌にヘッド全面を密着させてご使用ください。
- 特定部位への集中的な使用、レベルの上げすぎは肌トラブルの原因になりますのでおやめください。
- 痛みや不調を感じた場合や、お肌に異常があらわれた場合は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

ご使用前の準備




化粧を洗い落とし、 お肌を清潔な状態にする

洗顔後や入浴後などメイクや皮脂、汗など余分な汚れのない、お肌が清潔な状態でご使用ください。



身につけている アクセサリ類をはずす

身につけているアクセサリ類(イヤリング、ピアス、指輪、プレスレット、ネックレス等)や腕時計などの貴金属類、コンタクトレンズはすべてはずしてください。

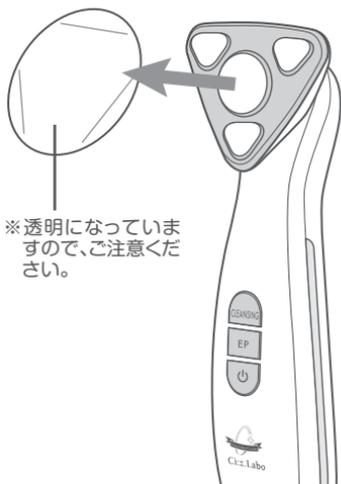

※透明になっていますので、ご注意ください。

透明保護シールをはずす

購入時、本体のヘッド部に透明保護シールが貼られています。必ず外してからご使用ください。

⚠ 注意


透明保護シールをつけたまま使用した場合、故障の原因となります。

イオンクレンジングモードご使用方法

通常の洗顔では落ちにくい空気中の埃などを電気力でクレンジングしていくモードです。

① 電源ボタンを約1秒間長押しし、電源をONにする

電源がONになると、EPボタンが青く点灯し、ヘッド部が赤く点灯し、「ピッ」と鳴ります。

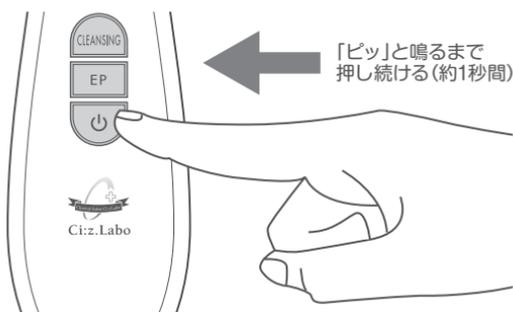

② CLEANSINGボタンを押す(赤色が点灯)



注意

クレンジングボタンが赤く点灯していない場合は、モードがOFFになっています。クレンジングボタンをもう一度押し直して、モードを変更してください。

③ お手入れをする部位に化粧水などをたっぷりと塗布してください



お手入れをする部位に化粧水などを、まんべんなく塗布してください。
※水分に汚れを吸着させますので、とろみのある化粧水などがおすすめです。
※お水でも構いません。
※ウォータークレンジングなどでも構いませんがその際はしっかりと洗い流してください。

④ ヘッドをお肌に当て、お手入れする

約10分間で自動的に動作が停止し、電源がOFFになります。



※クレンジングモードが終了したら、洗い流しても、そのままお手入を続けて頂いても構いません。


⚠ 注意

イオンクレンジング中は刺激・振動を感じません

イオンクレンジングは微弱な電気の流れによってクレンジングしていきます。お手入れ中は肌に刺激等を感じませんが、故障ではありません。

⑤ 電源ボタンを約1秒間長押しし、電源をONにする

電源がONになると、EPボタンが青く点灯し、ヘッド部が赤く点灯し、「ピッ」と鳴ります。

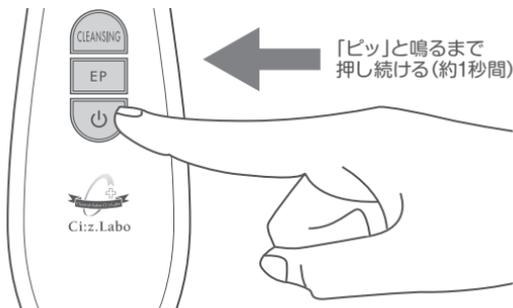

⑥ EPボタンを押し、EPモードに変更し、レベルを調整する

EPボタンを短押しするたびに「ピッ」と鳴り、レベルが変化します。



※EPモードは、EMS・導入(※角質層まで)・LEDの同時ケアが可能です。




※初めて使用する際はレベル(弱)からお使いください。

電源ボタンを押すたびに、EPボタンの点灯色が変わり、レベルが変化します。
※OFFの次はレベル(弱)に戻ります。

⑦ 美容液・ゲルをたっぷり塗布し、ヘッドをお肌に当てる

約10分間で自動的に動作が停止し、電源がOFFになります。

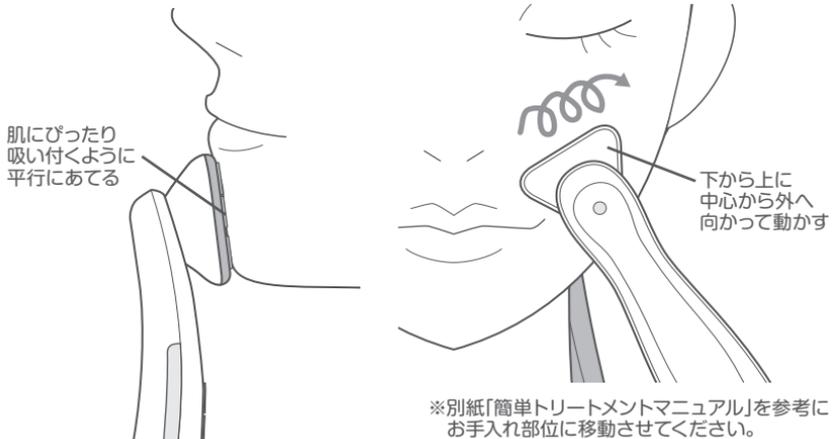

クルクル回しながらお肌にあてることで、エステティシヤンのハンドケア感覚を体感できるよう設計されています。

- ※レベルを強くしても刺激をあまり感じない場合は、肌塗布されている美容液・ゲルの量が足りない可能性があります。お手入れする部位に再度美容液・ゲルを塗布してください。
- ※シートマスクの上から行うこともできます。(簡単トリートメントマニュアル参照)




注意

- お手入れ中はヘッドを1箇所止めずゆっくり動かし続けてください。
- 規定時間以上のご使用はおやめください。
- 特定部位への集中的なご使用、ご自身が不快に感じるレベルのご使用は肌トラブルの原因になりますのでおやめください。

⑧ お肌に残った美容液はそのままお肌に馴染ませるか、さっと洗い流すなどしてから、通常の保湿を行い、終了してください。

本体の清掃はP.14「製品のメンテナンス方法」を参照してください。

EPモードおすすめ手順(フェイス)

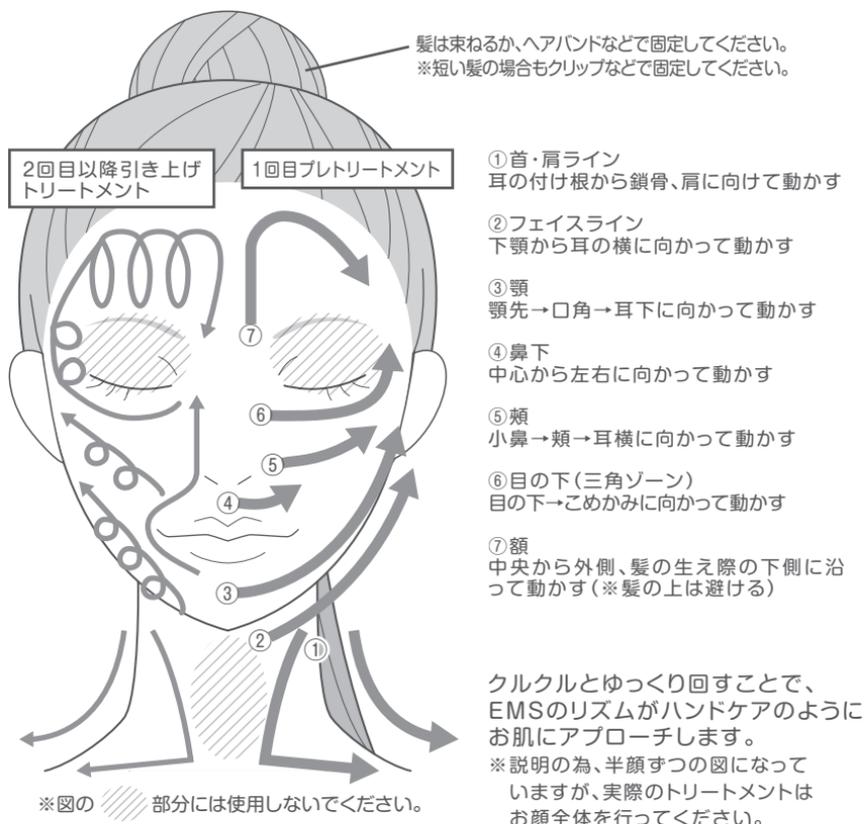


顔にご使用の際は、メイクを落として
清潔な状態でご使用ください。

※詳しくは「簡単トリートメントマニュアル」をご覧ください。



注意

・肌に塗布した化粧水等が乾いてきた場合は再度塗布しなおしてください。
・お手入れ中はヘッドを1箇所留めずゆっくり動かし続けてください。

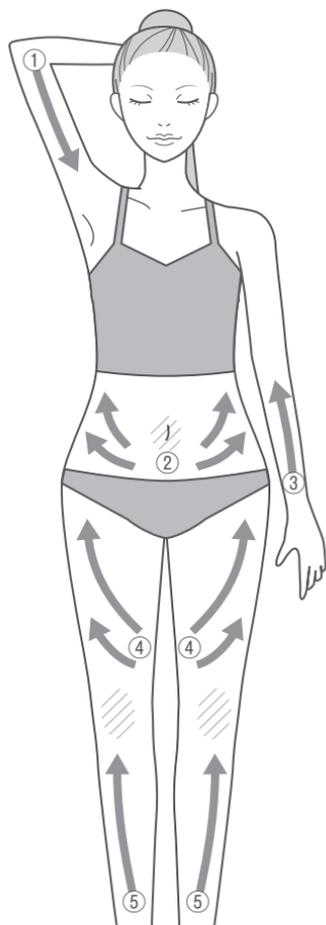

① 二の腕

肘下から脇に向かって動かす(※肘は避ける)

② ウエスト

へそ脇から脇腹に向かって動かす(※へそ周辺は避ける)

③ 腕


手首から肘に向かって動かす(※骨の上は避ける)

④ 太もも

膝上から足の付け根に向かって動かす(※膝は避ける)

⑤ ふくらはぎ

足首から膝下に向かって動かす(※骨の上は避ける)

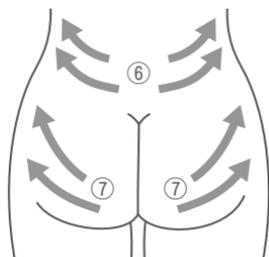

⑥ 背中

背骨から脇腹に向かって動かす(※背骨は避ける)

⑦ ヒップ

ヒップから脇腹に向かって動かす(※粘膜周辺は避ける)

※矢印のように下から上に向かって、まっすぐ流したり、クルクルと回しながら動かしてください。

※図の // 部分には使用しないでください。




注意

・肌に塗布した化粧水等が乾いてきた場合は再度塗布しなおしてください。
・お手入れ中はヘッドを1箇所ですぐにゆっくり動かし続けてください。

製品のメンテナンス方法

⚠ 注意 プラグを抜いて必ず電源がオフになっていることを確認してからお手入れしてください。電源が入った状態でお手入れすると、刺激等を受ける場合があります。

製品の性能を最適に保つため、毎回ご使用になる前と後に必ず製品の清掃を行い、必要に応じてお手入れの最中にも清掃を行なってください。

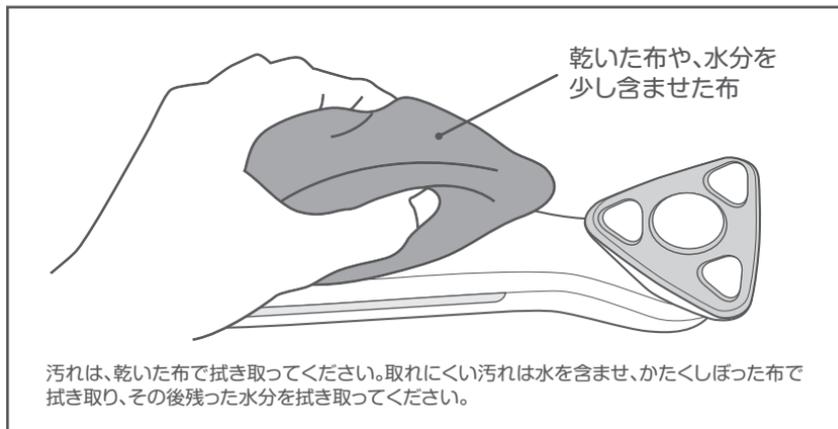

保管について

本品は次のような場所に保管しないでください

本製品は精密な機械・電子部品で作られています。次のような場所に保管すると動作不良の原因となりますので、絶対に避けてください。



直射日光の
当たる場所



ホコリやチリの
多い場所



温度変化の激しい場所
(温度35℃以上)



湿度変化の激しい場所
(湿度80%以上)



火気のある場所



水に濡れ
やすい場所



揮発性物質
ある場所




冷暖房機器に
近い場所



振動のある場所

注意

乳幼児や自分で意思表示できない人へ使用したり、手の届く場所に置かないでください。事故や体調不良の原因となります。未成年者が行う場合は、必ず保護者の指導の下、十分に注意して使用してください。

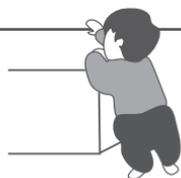

廃棄について

お住まいの区や市町村役場に確認の上、お近くの小型家電リサイクルBOXなどへ投入するか指定の場所へ持ち込んでください。安全に処分することができるだけでなく、希少資源を回収しリサイクルにつなげる意味合いもあります。なお内部の液体が漏れ出すとヤケドなどがをする恐れがあります。絶対に壊さずにお持ち込みください。

故障かなと思ったら

質問	対処方法
電源ボタンを押しても電源が入らない／誤作動が起きる	本製品は、電源ボタンを長押し(約1秒間)することにより、電源が入ります。長押ししても電源が入らない場合は十分に充電されていない可能性があります。もしくは、電源アダプタの断線あるいは故障の可能性があります。お買い上げの販売店もしくは発売元までご連絡ください。
充電台に本体を挿しても充電中のランプがつかない	本体が満充電になっているか、充電台に正しくセットされていない可能性があります。
使用中に機械が熱くなる	長時間連続して使用すると、本体内部の部品が熱を持つことがあります。熱が冷めるまでしばらく電源をお切りください。電源を入れてすぐに高熱になる場合は故障の可能性があります。お買い上げの販売店もしくは発売元までご連絡ください。
電氣的エネルギーの刺激を感じない	化粧水や美容液の量が足りない場合、刺激を感じづらくなります。ヘッド部のすべりが悪くなったり、刺激を感じづらくなった場合には、化粧水や美容液を足してください。 ※イオンクレンジングには刺激や体感はありません。
上記トラブルチェックを行っても正常に動作しない	部品または製品の故障の可能性があります。使用を中止し、お買い上げの販売店もしくは発売元までご連絡ください。
その他、使用中に異音や異変を感じた場合	直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店もしくは発売元までご連絡ください。
充電池が劣化した場合	一般家電用品と同様、充電池には経年劣化は発生します。その際は お買い上げの販売店もしくは発売元までご連絡ください。

注意

イオンクレンジング中は刺激・振動を感じません

.....
イオンクレンジングは微弱な電気の流れによってクレンジングしていきます。お手入れ中は肌に刺激等は感じませんが、故障ではありません。

海外でのご使用について

本製品はAプラグです。それ以外の場合は、プラグ変換アダプターをご使用ください。
 ※プラグ変換アダプターは付属品ではありません。 ※必ず交流100～240Vで使用する。

タイプ	プラグ形状	主な使用国
A		日本、アメリカ、カナダ、ハワイ、スペイン、グアム島、サイパン島、タイ、韓国、台湾、中国、フィリピン、ベトナム、ブラジル、トルコなど
B3		イギリス、スイス、中国、香港、インド、シンガポール、フィリピン、エジプト、南アフリカ共和国など
BF		カナダ、イギリス、スイス、タイ、韓国、シンガポール、中国、香港、エジプト、南アフリカ共和国など
C		イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、インド、タイ、韓国、中国、香港、マレーシア、トルコなど
O		イギリス、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、韓国、台湾、中国、フィリピン、アルゼンチンなど

- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- プラグ変換アダプタについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

別売品



メソソフトNEO
 (フェイスクリーム)
 メーカー希望小売価格
 8,800円(税込)



AC・バランス
 フェイスマスク
 メーカー希望小売価格
 3,465円(税込)



別売品はCI:Z.Labo公式オンラインショップにてお買い求めいただけます。
 ※掲載品の仕様・価格は、予告なく変更になることがあります。ご了承ください。

CI:Z.Labo公式オンラインショップ
<https://www.cizlabo-store.com/>

無料修理規定

1. 取扱説明書の注意書きに従って使用した状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。
- ※ 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品（本体・充電台・電源アダプタ）と保証書をご持参ご提示いただくか、発売元にご連絡の上、商品（本体・充電台・電源アダプタ）と保証書、故障内容と返送先を書いたメモを同封し、お送りください。
2. 保証期間内でも次の場合には原則として有料になります。
- ① 取扱説明書以外の使用上の誤りに起因する故障及び損傷
 - ② 不当な修理や改造による故障や損傷
 - ③ お買い上げ後の輸送・落下などによる故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（例えば業務用）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ 保証書のご提示がない場合
 - ⑥ 保証書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、あるいは、字句を書き替えられた場合
 - ⑦ 車両・船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
 - ⑧ 火災・地震・水害・落雷・その他天変地異・異常電圧・指定外の使用電源（電圧・周波数）などによる故障及び損傷
 - ⑨ 弊社以外で誤った修理をしたり、改造したために生じた故障及び損傷
 - ⑩ フリマアプリ・オークションサイト等、シーズ・ラボ店頭・公式オンラインショップ・公式ECサイト・家電量販店以外での購入の場合
3. 本保証書は、日本国内のみ有効です。
本保証書は、再発行いたしませんので大切に保管してください。
この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な点は、お買い上げの販売店または、発売元までお問い合わせください。
保証期間経過後の修理については、下記「アフターサービスについて」をご覧ください。

アフターサービスについて

●保証書について

保証書は「お買い上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお確かめになって大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日より1年になります。

●修理を依頼される前に

修理を依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき再度ご点検のうえ、異常がある場合、お買い上げの販売店または発売元までご連絡ください。

●故障した場合の連絡について

お買い上げの販売店または発売元までご連絡ください。

●保証期間経過後の修理について

修理については、お買い上げの販売店もしくは発売元にご連絡の上、商品（本体・充電台・電源アダプタ）と一緒に保証書、故障内容をご返送先を記入したメモを同封し、お買い上げの販売店までご送付ください。保証期間終了後の修理は有料とさせていただきます。またその際の配送料はお客様負担となります。修理後、宅配便の着払いにてお客様に返送いたします。修理しても商品の機能が維持できない場合は修理いたしかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。

